

EQ-M

Cordless Endodontic Motor

EQ-M

Accessories

EQ-M	P2801-XX*
Motor Handpiece	A2811
Contra Angle	A2812
Charger	A2813
Battery	A2814
Protective Sleeve	126-070
Power Cord	A2816-XX*
AC/DC Adapter	A2817-X*

X*- BL(Black), WH(White)
XX*-KR(Korea), EU(Europe), US(United States)

Specifications

Electric Shock Protection		Class 1 Equipment - Internal power supply type/ Type BF Applied (contra angle)
Waterproof rating		IPX0
Battery		Lithium-ion battery
Motor Handpiece	Speed Range	100~1,000RPM
	Torque Range	1.0~4.0Ncm
	Rated Input	3.7Vdc / 800mAh (Lithium-ion-battery)
	Dimensions	202 X 28 X 28mm (including battery,contra angle)
	Weight	130g (including battery,contra angle)
AC/DC Adapter	Operation Mode	Continuous operation
	Input Voltage	100~240V, 50~60Hz
	Output Voltage	9.0Vdc
	Output Current	2.0A

Recommended root canal instrument according to ISO 1797-1:
Nickel-titanium files, suitable for 360° rotation,
shaft diameter 2.35mm(type1)


اجازه دهید مهارت های درمانی شما با EQ-M به حداکثر برسد

جنبش جدید ART توسط متا بیومد شکستگی فایل های NITI را کاهش می دهد و درمان با کیفیت بالا را تضمین می کند دستگاه را بگیرید و خود را هنرمند کنید



ثبت اختراع ARTMotion با کارایی بالا که مقاومت در برابر شکستگی فایل را تا 25% و بیشتر افزایش می دهد

یک مفهوم جدید از کنترل موتور است که با تقسیم نیرو ها به چندین روش، مانند پالایش جواهرات با ART Motion روی فایل و کانال ریشه را کاهش می دهد به کلینیک شما امکان رقابت را می دهد و رضایت بیماران را به شدت افزایش می دهد.

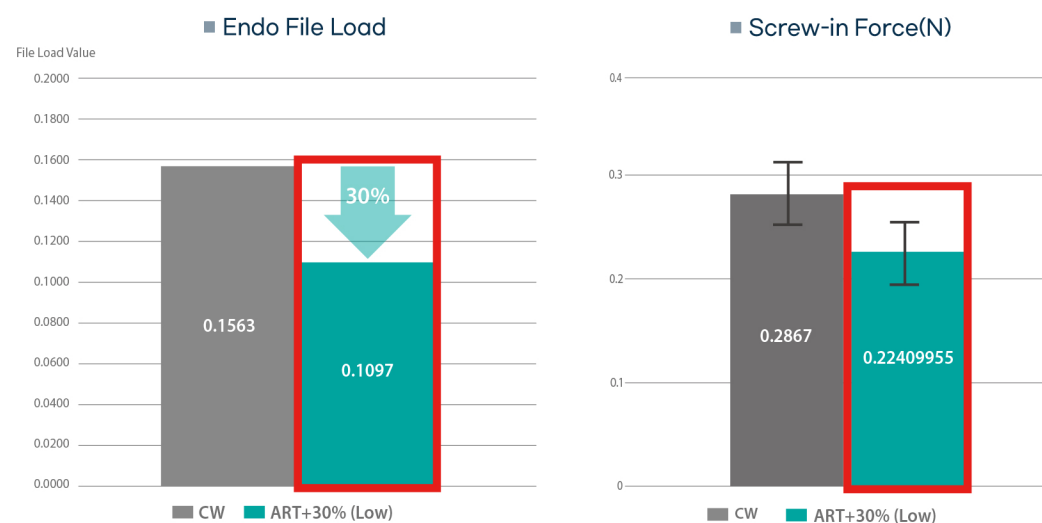

Source: Kyungpook National University School of Dentistry

- باتری های اضافی (2EA) با کیفیت بالا
- ۱ ساعت استفاده مداوم تضمین شده
- حداثر عملکرد دستگاه را برای یکسال تضمین می کند

- استاندارد جهانی
- موتور ساخت سوئیس
- تضمین ایمنی گشتاور در هر زمان و تا ۳۰۰۰ ساعت کارکرد
- سر و صدا و لرزش بسیار کم

- طراحی کاربر پسند
- طراحی ارگونومیک برای بهبود عملکرد کاربر
- ۱۳۰ گرم فوق سبک، خستگی کاربر را در طول زمان کاهش می دهد.

- چرخش ۳۶۰ درجه Contra Angle
- متابایومد Contra Angle خود را توسعه داده است
- زاویه چرخش ۳۶۰ درجه می تواند آزادانه به حرکات در طول درمان پاسخ دهد. مقاومت در برابر مواد شیمیایی و حرارت
- از تغییر رنگ و تغییر شکل ظاهری با استریلر اسیون جلوگیری می کند

- کاهش بار روی کانال ریشه خشک، فایل با پراکندگی کورس ها
- با تغییر سرعت چرخش موتور و افزایش شکستگی فایل مقاومت بیش از 25% در مقایسه با سایر رقبا، مستعد آسیب باتری نیست بدون نیاز به تجهیزات خاصی که برای EQ-M طراحی شده است

- راهنمای نور با اتصال EQ-PEX
- نور از دکمه اصلی EQ-M و نگهدارنده فایل B از EQ-PEX امکان تایید شهودی اندازه گیری ها و تشخیص دقیق را در زمان واقعی در طول درمان فراهم می کند.

